


**Sani-Tip<sup>®</sup>**

**MC-1 Conversion Kit**

Part No. 122340N

For Micron or NSK Air/Water Syringe

**Kit de conversion MC-1**

Pièce N° 122340N

Pour seringues air/eau Micron ou NSK

**Kit de conversión MC-1**

Pieza n.º 122340N

Para la jeringa de aire/agua Micron o NSK



**MC-1 Umrüstkit**

Artikelnr. 122340N

Für Micron oder NSK Luft-/Wassersprays



**Kit di conversione MC-1**

Parte No. 122340N

Per siringhe aria-acqua tipo Micron o NSK

**Комплект для переоборудования MC-1**

Каталожный номер 122340N

Для воздушных или водных шприцев Micron или NSK

**Caution: United States Federal law restricts this device for sale by, or on the order of, a licensed dental professional.**



**INDICATIONS FOR USE**

Used to transmit air or water to the operatory field during operative procedures.

**CONTRAINDICATIONS**


This Conversion Kit is not indicated for use with any other air/water syringes.







**WARNINGS**

- Sani-Tip® Conversion Kits are designed to function exclusively with Sani-Tip® disposable syringe tips. To minimize physical harm to patient, or equipment damage and/or malfunction, use only adapter components and clear Sani-Tip plastic syringe tips manufactured by DENTSPLY Professional for the Sani-Tip® System. Follow the enclosed instructions.
- Sani-Tip® disposable syringe tips are for single use only. Dispose after use.
- It is the responsibility of the Dental Healthcare Professionals (DHCP) to determine the appropriate uses of this product and to understand the health of each patient, the dental procedures being undertaken, and industry and governmental agency recommendations, requirements, and regulations for safe practice of dentistry.
- To ensure adequate protection from cross contamination from other devices connected to the Dental Unit, it is highly recommended that the Dental Unit be installed with anti-retraction features. Additionally, the Dental Unit, including the anti-retraction features, must be properly maintained and periodically tested. For more information, please contact your Dental Unit manufacturer.
- Where asepsis is required or deemed appropriate in the best professional judgement of the DHCP, this product should not be used.

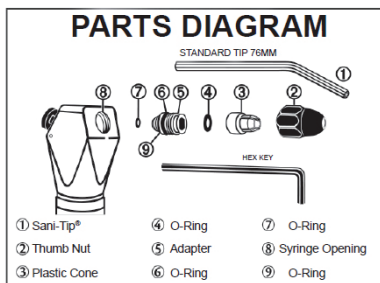**PRECAUTIONS**

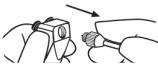- Although this conversion kit may be used with all Sani-Tip disposable syringe tips, it is recommended for use with the standard (76 mm) Sani-Tip disposable syringe tips.
- To help reduce cross contamination, use a new Sani-Shield disposable air/water syringe sleeve, in addition to a new Sani-Tip disposable tip, for every patient.

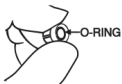**O-3 CONVERSION KIT AIR/WATER SYRINGES****CONVERSION KIT ADAPTER INSTALLATION INSTRUCTIONS**

- Remove existing thumb nut and syringe tip.
 
- Verify new adaptor (5) has o-ring (6) and o-ring (9) around middle section. Verify o-ring (7) is seated on back end of adaptor.
 
- Thread end of adaptor with small o-ring into syringe. Use hex key provided to hand-tighten new adaptor into syringe.
 
- Verify o-ring (4) is in place inside large opening of white plastic cone.
 
- With o-ring in place, firmly snap large end of white plastic cone over adaptor lip.
 
- Hand-thread thumb nut (2) onto adaptor (5). Do not tighten until new tip has been inserted.
 

Installation is complete.

**CONVERSION KIT USER INSTRUCTIONS**

- With Thumb Nut loosened, insert new Sani-Tip® and push into adaptor as far as possible. While still pushing in on tip, twist tip 1/2 turn clockwise to create a tight seal over internal tapered water spindle. Tighten thumb nut.



- Hand - tighten thumb nut. (To redirect tip, push in on tip while rotating clockwise.)

**TEST PRIOR TO EACH USE:**

Express water, then express air only. If air contains moisture, or tip dislodges, refer to Troubleshooting section.

- To replace tip, loosen thumb nut. Remove and discard used tip.

## INFECTION CONTROL PROCEDURES

### WARNINGS

- Conversion Kits are not sterile upon receipt and must be sterilized prior to use in accordance with the following instructions.

### LIMITATIONS ON PROCESSING

- Do not use chemical disinfectants prior to sterilization or rapid deterioration of the material may occur.
- Cold liquid disinfection/sterilization, chemical vapor sterilization, and dry heat sterilization methods have not been tested or validated for efficacy and are not recommended for use. Use may void warranty.
- The plastic cone and o-ring are not steam autoclave sterilizable.

### INSTRUCTIONS

#### Point of use:

Remove excess soil with disposable cloth or paper.

#### Containment and Transportation:

Protect conversion kit components from damage. Components should be reprocessed as soon as is reasonably practical following use. Components left standing wet may stain or corrode.

#### Preparation for decontamination:

Remove excess debris from the components using a disposable cloth or paper. Discard cloth/paper after use. Disassemble the conversion kit from the air/water syringe. Remove the plastic cone and adapter o-ring.

#### Cleaning: automated

None.

#### Cleaning: manual

1. Clean all external surfaces of the Sani-Tip® conversion kit, including the air/water syringe with a mild detergent and water solution. Dry with a lint-free cloth.
2. Remove the conversion kit from the air/water syringe.
3. Clean all internal surfaces of the adapter, thumb nut, plastic cone and o-ring with a mild detergent and water solution. Dry with a lint-free cloth.
4. Further process the adapter and thumb nut following the Sterilization procedure listed.
5. The plastic cone and o-ring are not steam autoclave sterilizable. Further process following the disinfection procedures listed.

#### Disinfection:

Disinfect the plastic cone and o-ring using standard disinfection solutions.

#### Packaging:

Place thumb nut and adapter in a paper or paper/plastic steam sterilization pouch. Components may be loaded into dedicated instruments tray.

## INFECTION CONTROL PROCEDURES

### INSTRUCTIONS continued

#### Sterilization:

Use a steam autoclave. Place bagged adapter and thumb nut into the steam autoclave, paper side up when using a paper/plastic pouch. After warm-up is completed, operate at a sterilizing temperature and pressure of 134°C/273°F to 137°C/279°F and pressure of 216kPa/31psi for 3 to 12 minutes.

*Alternate method: Place non-bagged adapter and thumb nut into the steam autoclave. After warm-up is completed, operate at a sterilizing temperature and pressure of 134°C/273°F to 137°C/279°F and pressure of 216kPa /31psi for 3 to 4 minutes. Components should be used immediately.*

#### Drying:

To dry, use the drying cycle of the autoclave. Set cycle for 20-30 minutes.

#### Maintenance, inspection and testing:

- Visually inspect to ensure all contamination is removed.
- Check for distortion, damage and wear. Discard damaged, worn or corroded components.

#### Storage:

To maintain sterility, instruments should remain bagged until ready to use.

### MANUFACTURER CONTACT

In the United States, contact DENTSPLY Professional Customer Service Technical Support at 800-989-8826. For areas outside the United States, contact your local DENTSPLY Representative.

## TROUBLESHOOTING

**PROBLEM:** Water leaking, wet air, loose tip and/or adapter. Indicates either:

- Center hole of Sani-Tip disposable tip is not fully seated over water spindle inside new adapter, or
- Correct Sani-Tip Conversion Kit is not properly installed, and/or is missing parts; thumb nut has not been fully tightened; incorrect tips are being used, or
- Adapter is not fully mounted onto syringe.
- Internal water spindle is damaged.

**SOLUTION:**

- Hold adapter body to prevent rotation and loosen thumb nut when interchanging the Sani-Tip disposable tip. Insert a new tip and push into the adapter as far as possible. While still pushing inward, twist top 1/2 turn clockwise to create a watertight seal over internal tapered water spindle. Tighten thumb nut.
- Make sure the correct Sani-Tip Conversion Kit is properly installed. Confirm presence of plastic cone and o-ring. Hold adapter body to prevent rotation and fully tighten thumb nut after inserting the new tip. Verify tips are clear plastic Sani-Tip disposable tips manufactured by DENTSPLY Professional for the Sani-Tip® System.
- Firmly push adapter as far as possible onto syringe. Adapter rim must be flush with syringe face to make proper connection.
- If internal water spindle inside Sani-Tip adapter is damaged, replace adapter.

**PROBLEM:** Tip does not fit through thumb nut.

**SOLUTION:** Loosen thumb nut a full turn to expand opening of plastic cone.

**PROBLEM:** Little or no water.

**SOLUTION:** Check for clogged or damaged water spindle inside adapter, or blocked water outlet in syringe head.

**PROBLEM:** Too much/little air or water pressure.

**SOLUTION:** Minor adjustments can be made at the dental unit. **Follow manufacturer's specifications.**

**ALWAYS TEST PRIOR TO USE:**

Express water, then express air only. If air contains moisture, or tip dislodges, refer to first problem and solution.

## MODE D'EMPLOI

Utilisation pour la transmission d'air ou d'eau vers la zone opératoire pendant une procédure opératoire.

## CONTRE-INDICATIONS

Ce kit de conversion n'est pas conçu pour une utilisation avec des seringues air/eau d'une autre marque.


## AVERTISSEMENTS

- Les kits de conversion Sani-Tip® sont conçus pour fonctionner uniquement avec les embouts de seringues jetables Sani-Tip®. Afin de minimiser les risques de blessure pour le patient, de dégâts au matériel et de dysfonctionnement, prendre garde à utiliser uniquement des composants d'adaptateur et des embouts de seringue Sani-Tip en plastique clair fabriqués par DENTSPLY Professional pour le système Sani-Tip®. Suivre les instructions ci-jointes.
- Les embouts jetables pour seringues Sani-Tip® sont à usage unique. Éliminer après utilisation.
- Il est de la responsabilité des praticiens dentaires de déterminer les conditions d'utilisation appropriées de ce produit, de connaître la santé de chaque patient et les procédures de soins mises en place, ainsi que d'être au fait des recommandations, exigences et réglementations gouvernementales et professionnelles relatives à la sécurité dans l'exercice de la profession.
- Afin d'assurer une protection adéquate contre les contaminations croisées provenant d'autres appareils branchés sur l'unité dentaire, il est fortement recommandé de pourvoir cette dernière de fonctions anti-rétraction lors de son installation. Il est également recommandé d'entretenir avec soin l'unité dentaire, y compris les dispositifs anti-rétraction, et de les tester régulièrement. Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec le fabricant de votre unité dentaire.
- Dans les cas où le praticien estime que l'asepsie est nécessaire ou se révèle appropriée, ce produit ne doit pas être utilisé.


## MISES EN GARDE

- Bien qu'il soit possible d'utiliser ce kit de conversion avec tous les embouts de seringues jetables Sani-Tip, il est recommandé de l'utiliser principalement avec les embouts jetables Sani-Tip standard (76 mm).
- Afin de réduire les contaminations croisées, utiliser un nouveau manchon jetable Sani-Shield pour seringues air/eau ainsi qu'un nouvel embout jetable Sani-Tip pour chaque patient.


## KIT DE CONVERSION O-3 POUR SERINGUES AIR/EAU

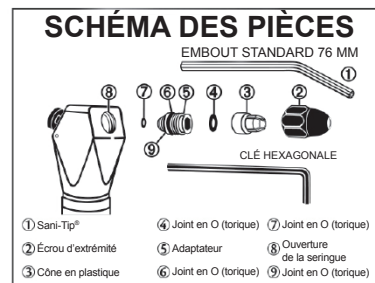

## CONSIGNES D'INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR DU KIT DE CONVERSION

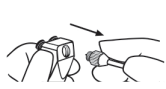

1. Retirer l'écrou d'extrémité et l'embout de seringue.

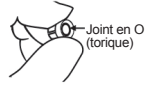

4. Vérifier que le joint en O (4) est correctement en place à l'intérieur de la plus grande ouverture du cône en plastique blanc.



2. Vérifier que les 2 joints en O (6 et 9) se trouvent autour de la partie centrale du nouvel adaptateur (5). Vérifier qu'un joint en O (7) se trouve sur la partie arrière de l'adaptateur.



5. Une fois le joint en O en place, enclencher fermement l'extrémité la plus grande du cône en plastique blanc sur le rebord de l'adaptateur.




3. Visser l'extrémité de l'adaptateur avec le petit joint en O dans la seringue. Utiliser la clé hexagonale fournie pour serrer manuellement le nouvel adaptateur dans la seringue.



6. Visser l'écrou d'extrémité (2) sur l'adaptateur (5) à la main. Ne pas serrer tant que le nouvel embout n'est pas inséré.

*L'installation est terminée.*

## MODE D'EMPLOI DU KIT DE CONVERSION

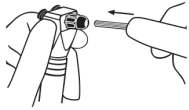

1. En maintenant l'écrou d'extrémité desserré, insérer le nouvel embout Sani-Tip® dans l'adaptateur aussi loin que possible. Continuer à pousser à l'intérieur en faisant tourner l'embout d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour former un joint étanche autour de la spirale à eau interne conique. Serrer l'écrou d'extrémité.



2. Serrer l'écrou d'extrémité à la main. (Pour repositionner l'embout, l'enfoncer en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.)

### TESTER AVANT CHAQUE UTILISATION :

**Rejeter l'eau, puis l'air uniquement. Si l'air contient de l'humidité ou si l'embout se déboîte, consulter la section traitant du dépannage.**

3. Pour remplacer l'embout, desserrer l'écrou d'extrémité. Retirer et jeter l'embout usagé.

## PROCÉDURES DE CONTRÔLE DES INFECTIONS

### AVERTISSEMENTS

- Lors de leur livraison, les kits de conversion ne sont pas stériles et doivent donc être stérilisés conformément aux instructions suivantes avant d'être utilisés.

### LIMITES À L'UTILISATION

- Ne pas utiliser de désinfectants chimiques avant la stérilisation, sinon les matériaux risquent de se détériorer rapidement.
- Il est déconseillé d'employer des techniques de stérilisation et désinfection par liquide froid, par vapeur chimique et par chaleur sèche car celles-ci n'ont pas été testées et leur efficacité n'est pas garantie. Leur utilisation peut annuler la garantie.
- Le cône en plastique et le joint en O ne sont pas conçus pour une stérilisation à l'autoclave à vapeur.

### INSTRUCTIONS

#### Zone de traitement :

Retirer les impuretés en excès avec du tissu ou du papier jetable.

#### Stockage et transport :

Protéger les composants du kit de conversion contre tout risque d'endommagement. Nettoyer et stocker les composants dès que possible après utilisation. Les composants présentant encore de l'humidité risquent de se tacher ou de rouiller.

#### Préparation à la décontamination :

Retirer les impuretés des composants avec du tissu ou du papier jetable. Jeter le tissu/papier jetable après utilisation. Retirer le kit de conversion de la seringue air/eau en le démontant. Retirer le cône en plastique et le joint en O de l'adaptateur.

#### Nettoyage : automatique

Aucun.

#### Nettoyage : manuel

1. Nettoyer toutes les surfaces externes du kit de conversion Sani-Tip®, y compris la seringue air/eau, avec une solution de détergent doux et d'eau. Sécher avec un tissu non-pelucheux.
2. Retirer le kit de conversion de la seringue air/eau.
3. Nettoyer toutes les surfaces internes de l'adaptateur, de l'écrou d'extrémité, du cône en plastique et du joint en O avec une solution de détergent doux et d'eau. Sécher avec un tissu non-pelucheux.
4. Traiter ensuite l'adaptateur et l'écrou d'extrémité conformément aux procédures de stérilisation indiquées.
5. Le cône en plastique et le joint en O ne sont pas conçus pour une stérilisation à l'autoclave à vapeur. Poursuivre l'opération conformément aux procédures de désinfection indiquées.

#### Désinfection :

Désinfecter le cône en plastique et le joint en O avec des solutions de désinfection standard.

#### Emballage :

Placer l'écrou d'extrémité et l'adaptateur dans un sachet de stérilisation à la vapeur en papier ou en papier/plastique. Les composants peuvent être disposés dans le tiroir à instruments prévu à cet effet.

## PROCÉDURES DE CONTRÔLE DES INFECTIONS

### INSTRUCTIONS (suite)

#### Stérilisation :

Utiliser un autoclave à vapeur. Disposer l'adaptateur et l'écrou d'extrémité ensachés dans l'autoclave à vapeur, en orientant la face en papier vers le haut en cas de sachet de stérilisation fabriqué en plastique et en papier. Après la phase de préchauffage, stériliser à une température entre 134 °C/273 °F et 137 °C/279 °F et à une pression de 216 kPa/31 psi pendant 3 à 12 minutes.

*Autre méthode : Disposer l'adaptateur et l'écrou d'extrémité non ensachés dans l'autoclave à vapeur. Après la phase de préchauffage, stériliser à une température entre 134 °C/273 °F et 137 °C/279 °F et à une pression de 216 kPa/31 psi pendant 3 à 4 minutes. Les composants doivent être utilisés immédiatement après leur stérilisation.*

#### Séchage :

Pour le séchage, utiliser le cycle de séchage de l'autoclave. Régler le cycle à 20-30 minutes.

#### Entretien, inspection et procédures de tests :

- Inspecter visuellement les composants pour s'assurer que toute contamination est neutralisée.
- Vérifier qu'aucune déformation, endommagement ni usure ne sont présents. Jeter tout composant endommagé, usé ou corrodé.

#### Conservation :

Afin de préserver leur stérilité, les instruments doivent rester ensachés jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour l'utilisation.

### COORDONNÉES DU FABRICANT

Pour les États-Unis, contacter le service client et d'assistance technique de DENTSPLY Professional au 800-989-8826. Pour les autres pays, contacter le représentant DENTSPLY Professional local.

## DÉPANNAGE

**PROBLÈME :** Fuite d'eau, humidité de l'air, embout et/ou adaptateur mal fixé(s). Indique soit :

- a.) L'orifice central de l'embout jetable Sani-Tip n'est pas bien fixé sur la spirale à eau à l'intérieur du nouvel adaptateur, ou
- b.) Le kit de conversion Sani-Tip convient, mais il n'est pas installé correctement, et/ou des pièces manquent ; l'écrou d'extrémité n'est pas bien serré, ou les mauvais embouts sont utilisés, ou
- c.) L'adaptateur n'est pas complètement emboîté sur la seringue.
- d.) La spirale à eau interne est endommagée.

#### SOLUTION :

- a.) Maintenir l'adaptateur pour l'empêcher de tourner et desserrer l'écrou d'extrémité pour remplacer l'embout jetable Sani-Tip. Insérer un nouvel embout et le pousser à l'intérieur de l'adaptateur, le plus loin possible. Tout en continuant d'enfoncer l'embout à l'intérieur, faire tourner l'embout d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre afin de former un joint étanche à l'eau autour de la spirale interne. Serrer l'écrou d'extrémité.
- b.) S'assurer que le bon kit de conversion Sani-Tip est correctement installé. S'assurer que le cône en plastique et tous les joints en O sont bien présents. Maintenir l'adaptateur pour l'empêcher de tourner et serrer complètement l'écrou d'extrémité après l'insertion d'un nouvel embout. Vérifier que les embouts sont en plastique transparent et qu'ils ont été fabriqués par DENTSPLY Professional pour le système Sani-Tip®.
- c.) Emboîter l'adaptateur sur la seringue du mieux possible en poussant fermement dessus. Pour que la jonction soit correcte, le bord de l'adaptateur doit s'aligner avec celui de la seringue.
- d.) Si la spirale à eau à l'intérieur de l'adaptateur Sani-Tip est endommagée, remplacer l'adaptateur.

**PROBLÈME :** L'embout ne passe pas à travers l'écrou d'extrémité.

**SOLUTION :** Desserrer l'écrou d'un tour complet afin d'agrandir l'ouverture du cône en plastique.

**PROBLÈME :** Peu ou pas d'eau du tout.

**SOLUTION :** Examiner la spirale à l'intérieur de l'adaptateur pour s'assurer qu'elle n'est pas endommagée ou encombrée, ou examiner la sortie d'eau au niveau de la tête de la seringue pour s'assurer qu'elle n'est pas obstruée.

**PROBLÈME :** Pression d'air ou d'eau trop importante ou insuffisante.

**SOLUTION :** La pression de l'air et de l'eau peut être ajustée au niveau de l'unité dentaire. *Suivre les indications du fabricant.*

#### TOUJOURS TESTER AVANT CHAQUE UTILISATION.

*Rejeter l'eau, puis l'air uniquement. Si l'air contient de l'humidité ou si l'embout se déboîte, consulter le premier problème et sa solution.*

**INDICACIONES DE USO**

Transmisión de agua o aire al campo quirúrgico durante las intervenciones quirúrgicas.

**CONTRAINDICACIONES**


Este kit de conversión no está indicado para usarse con otras jeringas de agua/aire.







**ADVERTENCIAS**

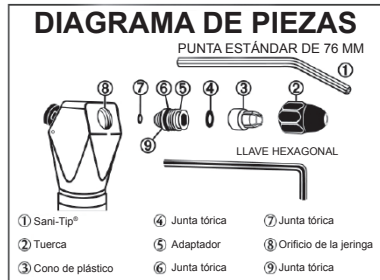- Los kits de conversión Sani-Tip® están diseñados para ser usados exclusivamente con las puntas desechables Sani-Tip®. Para minimizar lesiones al paciente y daños al equipo o averías, use solo adaptadores y puntas de plástico transparentes Sani-Tip fabricadas por DENTSPLY Professional para el sistema Sani-Tip®. Siga las instrucciones que se adjuntan.
- Las puntas desechables Sani-Tip® están diseñadas para un solo uso. Deséchelas después de utilizarlas.
- Los profesionales de la odontología tienen la responsabilidad de utilizar este producto de forma adecuada, conocer el estado de salud de cada paciente, los procesos dentales que practican y las recomendaciones y requisitos del sector, además de las leyes establecidas por las autoridades competentes.
- Para garantizar una protección adecuada frente a la contaminación cruzada de otros dispositivos conectados a la unidad dental, se recomienda muy especialmente instalar en esta última mecanismos antirretracción. Además, se debe llevar a cabo un mantenimiento adecuado y una evaluación periódica tanto de la unidad dental como de los mecanismos antirretracción. Para obtener más información, póngase en contacto con el fabricante de su unidad dental.
- Este producto no debe utilizarse cuando sea necesaria la asepsia o el profesional de la odontología la considere oportuna.



**PRECAUCIONES**

- Aunque el kit de conversión puede utilizarse con todas las puntas desechables Sani-Tip, se recomienda su uso con las puntas desechables Sani-Tip estándar de 76 mm.
- Para reducir la contaminación cruzada, utilice una funda desechable para jeringas de agua/aire Sani-Shield nueva además de una punta desechable Sani-Tip nueva para cada paciente.

**KIT DE CONVERSIÓN O-3 PARA JERINGAS DE AGUA/AIRE****INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DEL KIT DE CONVERSIÓN**

- Extraiga la tuerca y la punta. 
  - Compruebe que el nuevo adaptador (5) tiene las juntas tóricas (6) y (9) en la parte central. Compruebe que la junta tórica (7) está en el extremo posterior del adaptador. 
  - Enrosque en la jeringa el extremo del adaptador con la junta tórica pequeña. Utilice la llave hexagonal incluida en el kit para apretar a mano el nuevo adaptador en la jeringa. 
  - Compruebe que la junta tórica (4) esté colocada dentro de la abertura grande del cono blanco de plástico. 
  - Una vez esté colocada la junta tórica, encaje con fuerza el extremo más grande del cono blanco de plástico alrededor del borde del adaptador. 
  - Enrosque la tuerca (2) en el adaptador (5). No la apriete hasta que se haya introducido la punta nueva. 
- La instalación ha finalizado.*

**INSTRUCCIONES DE USO DEL KIT DE CONVERSIÓN**

- Una vez aflojada la tuerca, inserte la nueva punta desechable Sani-Tip® e introdúzcala en el adaptador todo lo que pueda. Mientras empuja hacia adentro, gire la punta media vuelta en el sentido de las agujas del reloj para que quede herméticamente unida al husillo cónico para el agua. Apriete la tuerca. 
- Apriete manualmente la tuerca. (Para orientar la punta correctamente, presiónela mientras la hace girar en el sentido de las agujas del reloj.) 

**COMPROBACIÓN ANTES DE CADA USO**

Expulse agua y, a continuación, expulse solo aire. Si el aire está húmedo o la punta se desenchaja, consulte el apartado Localización y solución de problemas.

- Para reemplazar la punta, afloje la tuerca. Extraiga y deseche la punta usada.

## PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INFECCIONES

### ADVERTENCIAS

- Los kits de conversión no vienen esterilizados de fábrica, por lo que deben esterilizarse antes de usarse siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

### RESTRICCIONES

- No utilice desinfectantes químicos antes de la esterilización, ya que podrían acelerar el deterioro del material.
- La eficacia de los métodos de esterilización/desinfección con líquidos fríos, esterilización con vapores químicos y esterilización con calor seco no ha sido probada ni validada, por lo que no se recomienda su uso. Esterilizar el producto con alguno de estos métodos puede anular la garantía.
- El cono de plástico y la junta tórica no pueden esterilizarse con un autoclave de vapor.

### INSTRUCCIONES

#### Lugar de aplicación

Elimine el exceso de residuos con papel o paños desechables.

#### Conservación y transporte

Proteja los componentes del kit de conversión de cualquier daño. Los componentes deben desinfectarse tan pronto como sea posible después de usarlos. Los componentes que queden húmedos pueden desarrollar manchas u oxidarse.

#### Preparación para la descontaminación

Elimine el exceso de residuos de los componentes con papel o paños desechables. Deseche el papel o los paños después de usarlos. Desacople el kit de conversión de la jeringa de agua/aire. Extraiga el cono de plástico y la junta tórica del adaptador.

#### Limpieza: automática

No procede.

#### Limpieza: manual

- Limpie todas las superficies externas del kit de conversión Sani-Tip®, incluso la jeringa de agua/aire con una solución de agua y detergente suave. Séquelas con un paño que no deje pelusa.
- Extraiga el kit de conversión de la jeringa de agua/aire.
- Limpie todas las superficies internas del adaptador, la tuerca, el cono de plástico y la junta tórica con una solución de agua y detergente suave. Séquelas con un paño que no deje pelusa.
- Siga las instrucciones de esterilización que aparecen más abajo para esterilizar el adaptador y la tuerca.
- El cono de plástico y la junta tórica no pueden esterilizarse con un autoclave de vapor. En su lugar, siga las instrucciones de desinfección que se enumeran a continuación.

#### Desinfección

Desinfecte el cono de plástico y la junta tórica con una solución desinfectante estándar.

#### Envoltura

Coloque la tuerca y el adaptador en una bolsa de papel o de papel y plástico apta para esterilización con vapor. Los componentes pueden colocarse en bandejas para instrumentos destinadas a tal efecto.

## PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INFECCIONES

### INSTRUCCIONES (continuación)

Utilice un autoclave de vapor. Coloque en el autoclave de vapor la bolsa con la tuerca y el adaptador. Si utiliza una bolsa de papel y plástico, coloque el lado de papel hacia arriba. Después del precalentamiento, aplique una temperatura y presión de esterilización de entre 134 °C/273 °F y 137 °C/279 °F y una presión de 216 kPa/31 psi de 3 a 12 minutos.

*Método alternativo: Coloque el adaptador y la tuerca sin bolsa en el autoclave de vapor. Después del precalentamiento, aplique una temperatura y presión de esterilización de entre 134 °C/273 °F y 137 °C/279 °F y una presión de 216 kPa/31 psi de 3 a 4 minutos. Los componentes deben utilizarse inmediatamente.*

#### Secado

Para secar, ejecute el ciclo de secado del autoclave. Establezca un ciclo de 20-30 minutos.

#### Mantenimiento, inspección y pruebas

- Realice una inspección visual para asegurarse de que se ha eliminado cualquier resto de contaminación.
- Compruebe que no haya deformaciones, daños o desgaste. Deseche los componentes dañados, desgastados o corroídos.

#### Almacenamiento

Para mantener la esterilidad, los instrumentos deben permanecer en la bolsa hasta que estén listos para usarse.

### DIRECCIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

En Estados Unidos, el número de contacto del servicio técnico y atención al cliente de DENTSPLY Professional es 800-989-8826. Para otros países, póngase en contacto con su representante local de DENTSPLY.



## LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**PROBLEMA:** Fuga de agua, aire húmedo, punta y/o adaptador sueltos. Indica alguno de los siguientes problemas:

- el orificio central de la punta desechable Sani-Tip no está bien ajustado al husillo cónico para el agua que hay dentro del nuevo adaptador;
- el kit de conversión Sani-Tip no está debidamente instalado y/o le faltan piezas; la tuerca no está bien apretada, no se están utilizando las puntas adecuadas, o bien a que
- El adaptador no está totalmente montado en la jeringa.
- El husillo interno para el agua está dañado.

### SOLUCIÓN:

- Sujete el cuerpo del adaptador para evitar que gire y afloje la tuerca cuando cambie la punta desechable Sani-Tip. Introduzca la nueva punta en el adaptador todo lo que pueda. Mientras empuja hacia adentro, gire la punta media vuelta en el sentido de las agujas del reloj para que quede herméticamente unida al husillo cónico del agua. Apriete la tuerca.
- Asegúrese de que el kit de conversión Sani-Tip correcto está debidamente instalado. Compruebe que contiene el cono de plástico y la junta tórica. Sujete el cuerpo del adaptador para evitar que gire y apriete la tuerca al máximo después de introducir una punta nueva. Verifique que las puntas desechables Sani-Tip son de plástico transparente y fabricadas por DENTSPLY Professional para el sistema Sani-Tip®.
- Empuje con firmeza el adaptador lo máximo posible en la jeringa. El borde del adaptador debe estar alineado con la cara de la jeringa para estar bien conectado.
- Si está dañado el husillo cónico interno para el agua que se encuentra en el interior del adaptador Sani-Tip, reemplace el adaptador.

**PROBLEMA:** La punta no entra en la tuerca.

**SOLUCIÓN:** Afloje la tuerca una vuelta completa para ampliar la abertura del cono de plástico.

**PROBLEMA:** No sale agua o sale poca.

**SOLUCIÓN:** Compruebe si el conducto cónico del agua que hay dentro del adaptador está atascado o dañado, o si la salida del agua situada en la cabeza de la jeringa está bloqueada.

**PROBLEMA:** Aire o presión del agua insuficiente/excesivo.

**SOLUCIÓN:** Se pueden realizar pequeños ajustes en la unidad dental. **Siga las indicaciones del fabricante.**

### REALICE SIEMPRE LA SIGUIENTE COMPROBACIÓN ANTES DEL USO

Expulse agua y, a continuación, expulse solo aire. Si el aire está húmedo o la punta se desenchaja, consulte el primer problema y su solución.

## INDIKATIONEN

Wird bei operativen Eingriffen für die Übertragung von Luft oder Wasser zum Operationsbereich verwendet.

## KONTRAINDIKATIONEN

Dieses Umrüstkit ist nicht für den Gebrauch mit anderen Luft-/Wassersprays geeignet.


## WARNHINWEISE

- Sani-Tip®-Umrüstkits sind ausschließlich für den Gebrauch mit Sani-Tip®-Einsätzen geeignet. Um die Verletzungsgefahr für Patienten auf ein Minimum zu reduzieren und Schäden an den Geräten oder mögliche Fehlfunktionen zu verhindern, sollten Sie ausschließlich Adapterkomponenten und durchsichtige Sani-Tip Plastikspritzen von DENTSPLY verwenden, die für das Sani-Tip®-System entwickelt wurden. Halten Sie sich an die beiliegenden Anweisungen.
- Sani-Tip®-Einwegsätze sind nur für den einmaligen Gebrauch geeignet. Nach Verwendung entsorgen.
- Es liegt im Verantwortungsbereich von Fachärzten für Zahnheilkunde, den korrekten Einsatz des Produkts sicherzustellen und die Gesundheit der Patienten zu wahren, die entsprechenden zahnärztlichen Eingriffe zu tätigen und dabei die behördlichen und gewerblichen Empfehlungen, Richtlinien und Bestimmungen zur sicheren Durchführung zahnärztlicher Eingriffe zu gewährleisten.
- Um einen entsprechenden Schutz vor Kreuzkontaminationen durch andere Geräte zu vermeiden, die an die zahnmedizinische Einheit angeschlossen sind, wird dringend empfohlen, diese mit einer Vorrichtung gegen Einzug zu versehen. Die zahnmedizinische Behandlungseinheit muss zusätzlich zur Unterbindung eines automatischen Rückzugs ordnungsgemäß gewartet und in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Für ausführlichere Auskünfte wenden Sie sich bitte an den Hersteller ihrer zahnmedizinischen Behandlungseinheit.
- In Fällen, in denen Keimfreiheit erforderlich oder nach bestem Ermessen des Facharztes nötig ist, sollte dieses Produkt nicht verwendet werden.

## WARNHINWEISE

- Obwohl dieses Umrüstkit mit allen Sani-Tip-Einsätzen für Einwegspritzen verwendet werden kann, empfiehlt sich der Gebrauch mit Standardeinsatz Sani-Tip (76 mm) Einwegspraydüsen.
- Um das Risiko von Kreuzkontaminationen zu reduzieren, empfehlen wir die Verwendung der neuen Sani-Shield-Schutzhülsen für Einwegspritzen zusätzlich zu einem neuen Sani-Tip-Einwegsatz, und dies bei jeder Behandlung.


## O-3 UMRÜSTKIT Luft-/Wasserspray

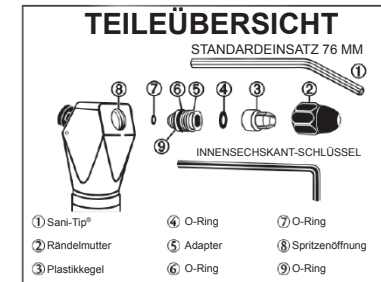

## UMRÜSTKIT ADAPTER-INSTALLATIONSANWEISUNGEN



1. Entfernen Sie die vorhandene Rändelmutter und den Sprayeinsatz.

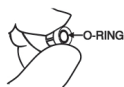

4. Überprüfen Sie, ob der O-Ring (4) in der großen Öffnung des weißen Plastikkegels platziert ist.



2. Überprüfen Sie, ob der neue Adapter (5) die O-Ringe (6) und (9) hat, die um den mittleren Bereich herum positioniert sind. Überprüfen Sie, ob der O-Ring (7) am hinteren Ende des Adapters sitzt.



5. Wenn der O-Ring an Ort und Stelle sitzt, lassen Sie das große Ende des weißen Plastikkegels fest über dem Adapterrand einrasten.




3. Drehen Sie das Ende des Adapters mit dem kleinen O-Ring auf die Spritze. Drehen Sie den neuen Adapter mithilfe des mitgelieferten Innensechskant-Schlüssels mit der Hand auf der Spritze fest.



6. Drehen Sie die Rändelmutter (2) auf den Adapter (5). Drehen Sie sie nicht fest, bevor der neue Einsatz eingeführt wurde.

*Die Installation ist abgeschlossen.*

## GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR UMRÜSTKIT

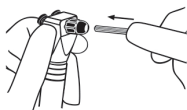

1. Setzen Sie einen neuen Sani-Tip® auf und schieben Sie ihn so weit wie möglich in den Adapter. Während Sie den Einsatz nach innen schieben, drehen Sie diesen um 180 Grad im Uhrzeigersinn, um eine Abdichtung der internen kegelförmigen Wasserspindel zu gewährleisten. Ziehen Sie die Rändelmutter fest.



2. Drehen Sie die Rändelmutter mit der Hand fest. (Drücken Sie den Einsatz zum Einstellen desselben nach innen und drehen Sie ihn dabei im Uhrzeigersinn.)

**FÜHREN SIE DIESE ÜBERPRÜFUNG VOR JEDEM EINSATZ DURCH: Drücken Sie erst nur Wasser heraus, dann nur Luft. Sollte die Luft Feuchtigkeit enthalten oder der Einsatz nicht fest sitzen, so sehen Sie bitte im Abschnitt Fehlerbehebung nach.**

3. Lockern Sie zum Austauschen des Einsatzes die Rändelmutter. Entfernen und entsorgen Sie den gebrauchten Sprayeinsatz.

## VERFAHREN ZUR INFEKTIONSVERMEIDUNG

### WARNHINWEISE

- Umrüstkits werden nicht steril geliefert und müssen vor dem Einsatz in Übereinstimmung mit den nachfolgenden Anweisungen sterilisiert werden.

### EINSCHRÄNKUNGEN BEZÜGLICH HANDHABUNG

- Verwenden Sie vor dem Sterilisieren keine chemischen Desinfektionsmittel, da es sonst zu einem schnellen Verschleiß des Materials kommen kann.
- Desinfektion/Sterilisation mit Kaltflüssigkeit, chemische Dampfsterilisation und Sterilisation durch Trockenluft wurden nicht auf deren Wirksamkeit getestet und werden daher nicht empfohlen. Bei Einsatz dieser Methoden kann die Garantie verfallen.

### ANWEISUNGEN

#### Einsatzort:

Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem Wegwerftuch oder -papier.

#### Verpackung und Transport:

Schützen Sie das Umrüstkit vor Beschädigung. Die Teile sollten nach einem Gebrauch ehestmöglich wiederaufbereitet werden. Es kann zu Verfärbungen oder Korrosion an Geräteteilen kommen, wenn diese nass bleiben.

#### Vorbereitung zur Dekontamination:

Entfernen Sie Verschmutzungen der Teile mit Hilfe von Wegwerftüchern oder -papier. Werfen Sie Tücher/Papier nach der Verwendung weg. Trennen Sie das Umrüstkit von der Luft-/Wasserspritze. Entfernen Sie den Plastikkegel und den O-Ring am Adapter.

#### Reinigung: automatisch

keine Anweisungen.

#### Reinigung: manuell

1. Reinigen Sie alle Oberflächen des Sani-Tip®-Umrüstkits einschließlich der Luft-/Wasserspritze mit einem sanften Reinigungsmittel und Wasser. Trocknen Sie mit einem fusenfreien Tuch nach.
2. Trennen Sie das Umrüstkit von der Luft-/Wasserspritze.
3. Reinigen Sie alle Innenflächen des Adapters, die Rändelmutter, den Plastikkegel und den O-Ring mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Trocknen Sie mit einem fusenfreien Tuch nach.
4. Behandeln Sie dann den Adapter und die Rändelmutter gemäß der genannten Sterilisationsverfahren.
5. Der Plastikkegel und der O-Ring können nicht dampfsterilisiert werden. Folgen Sie den genannten Anweisungen zur Desinfektion.

#### Desinfektion:

Desinfizieren Sie den Plastikkegel und den O-Ring mit Hilfe von Standard-Desinfektionslösungen.

#### Verpackung:

Rändelmutter und Adapter in einen Papier- oder Papier-/Plastikbeutel zur Dampfsterilisation legen. Teile auf dazu vorgesehene Tablettis legen.

## VERFAHREN ZUR INFEKTIONSVERMEIDUNG

### ANWEISUNGEN Fortsetzung

#### Sterilisation:

Verwenden Sie einen Dampfautoklaven. Legen Sie die Teile im Beutel in den Dampfautoklaven (bei Verwendung von Papier-Plastikbeuteln mit Papierseite nach oben). Nach beendeter Aufwärmung lassen Sie den Prozess bei einer Sterilisationstemperatur von 134 °C/273 °F bis 137 °C/279 °F und einem Druck von 31psi/216kPa Sterilisation für 3 bis 12 Minuten durchlaufen.

*Alternativmethode: Legen Sie die Teile ohne Beutel in den Dampfautoklaven. Nach beendeter Aufwärmung lassen Sie den Prozess bei einer Sterilisationstemperatur von 134 °C/273 °F bis 137 °C/279 °F und einem Druck von 31psi/216kPa Sterilisation für 3 bis 4 Minuten durchlaufen. Die Teile sollten unmittelbar eingesetzt werden.*

#### Trocknen:

Zum Trocknen verwenden Sie den Trockenzyklus des Autoklaven. Stellen Sie den Trockenzyklus auf 20-30 Minuten ein.

#### Wartung und Überprüfung:

- Instrumente einer Sichtprüfung unterziehen, um sicherzustellen, dass alle Kontaminationen entfernt wurden.
- Auf Verformung, Schaden oder Abnutzung überprüfen. Beschädigte, abgenutzte oder korrodierte Teile entsorgen.

#### Aufbewahrung:

Instrumente müssen zum Erhalt der Sterilität bis zum nächsten Einsatz in Beuteln aufbewahrt werden.

### KONTAKTDATEN DES HERSTELLERS

In den Vereinigten Staaten: DENTSPLY Professional Customer Service Technical Support Tel: 800-989-8826. Außerhalb der USA: DENTSPLY Vertriebspartner vor Ort.

## FEHLERBEHEBUNG

**AUFGETRETENES PROBLEM:** Es tritt Wasser bzw. feuchte Luft aus und/oder Einsatz, bzw. Adapter sind locker. Dies bedeutet:

- a.) Der mittlere Durchlass des Sani-Tip-Einwegansatzes sitzt nicht richtig über der Wasserspindel im neuen Adapter.
- b.) Das entsprechende Sani-Tip-Umrüstkit ist nicht richtig installiert worden oder es fehlen Teile; die Mutter wurde nicht voll angezogen, oder es wird der falsche Einsatz verwendet.
- c.) Der Adapter ist nicht ausreichend auf der Spritze befestigt.
- d.) Die interne Wasserspindel ist beschädigt.

#### LÖSUNG:

- a.) Halten Sie das Adapterteil fest, um eine Rotation zu verhindern, und lockern Sie die Rändelmutter, wenn Sie einen Sani-Tip-Einwegansatz einsetzen. Setzen Sie einen neuen Einsatz auf und schieben Sie ihn so weit wie möglich in den Adapter. Während Sie den Einsatz nach innen schieben, drehen Sie diesen um 180 Grad im Uhrzeigersinn, um eine Abdichtung gegen Wasser der internen kegelförmigen Wasserspindel zu gewährleisten. Ziehen Sie die Rändelmutter fest.
- b.) Stellen Sie sicher, dass das richtige Sani-Tip-Umrüstkit ordnungsgemäß installiert wurde. Überprüfen Sie, ob der Plastikkegel und alle O-Ringe vorhanden sind. Halten Sie das Adapterteil fest, um eine Rotation zu verhindern und ziehen Sie die Rändelmutter vollständig an, bevor Sie den neuen Einsatz einführen. Stellen Sie sicher, dass die Sani-Tip-Einwegansätze aus klarem Plastik und von DENTSPLY Professional für das Sani-Tip®-System hergestellt wurden.
- c.) Drücken Sie den Adapter fest und so weit wie möglich auf die Spritze. Der Adapterrand muss auf gleicher Höhe wie die Vorderseite der Spritze liegen, um einen korrekten Anschluss zu ermöglichen.
- d.) Wenn die interne Wasserspindel im Sani-Tip-Adapter beschädigt ist, dann tauschen Sie den Adapter aus.

**AUFGETRETENES PROBLEM:** Einsatz passt nicht durch die Rändelmutter.

**LÖSUNG:** Lockern Sie die Rändelmutter um eine ganze Umdrehung und erweitern Sie so den Durchmesser des Plastikkegels.

**AUFGETRETENES PROBLEM:** Wenig oder kein Wasser.

**LÖSUNG:** Überprüfen Sie, ob die Wasserspindel im Adapter verstopft oder beschädigt ist oder ob der Wasserauslass im Spritzenkopf blockiert ist.

**AUFGETRETENES PROBLEM:** Zu hoher/zu geringer Luft-/Wasserdruck.

**LÖSUNG:** Es können geringe Veränderungen am zahnmedizinischen Gerät durchgeführt werden.

**Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers.**

#### VOR JEDEM EINSATZ DURCHZUFÜHRENDER TEST:

Drücken Sie erst nur Wasser heraus, dann nur Luft. Sollte die Luft Feuchtigkeit enthalten oder der Einsatz nicht fest sitzen, so sehen Sie bitte im Abschnitt Fehlerbehebung nach.

**INDICAZIONI PER L'USO**

Utilizzata per portare aria o acqua sul campo operatorio durante le procedure operative.

**CONTROINDICAZIONI**


Questo kit di conversione non è indicato per uso con nessun'altra siringa aria-acqua.

**AVVERTENZE**

- I kit di conversione Sani-Tip® sono concepiti per funzionare esclusivamente con i puntali per siringa monouso Sani-Tip®. Per ridurre al minimo il danno fisico al paziente, o il danno all'attrezzatura e/o un cattivo funzionamento, usare soltanto i componenti dell'adattatore e i puntali Sani-Tip in plastica trasparente prodotti da DENTSPLY Professional per il sistema Sani-Tip®. Seguire le istruzioni allegate.
- I puntali per siringa monouso Sani-Tip® sono esclusivamente per uso singolo. Smaltire dopo l'uso.
- È responsabilità del professionista della salute dentale determinare gli usi appropriati di questo prodotto e comprendere lo stato di salute di ogni paziente, le procedure dentali che si stanno intraprendendo e le raccomandazioni delle agenzie governative e del settore, i requisiti e le norme per una pratica sicura dell'odontoiatria.
- Per accertarsi di una protezione sufficiente dalla contaminazione da altri dispositivi collegati al riunito odontoiatrico, si raccomanda vivamente di installare il riunito odontoiatrico con sistema anti-ritrazione. Inoltre, il riunito odontoiatrico, compreso il sistema anti-ritrazione, deve essere sottoposto a corretta manutenzione ed essere testato periodicamente. Per maggiori informazioni, contattare il fabbricante del riunito odontoiatrico.
- Nei casi in cui, secondo il migliore giudizio professionale del professionista della salute dentale, l'asepsi è richiesta o ritenuta appropriata questo prodotto non deve essere usato.

**PRECAUZIONI**


- Anche se questo kit di conversione può essere usato con tutti i puntali per siringa monouso Sani-Tip, è suggerito l'uso con i puntali per siringa monouso Sani-Tip standard (76 mm).
- Per contribuire a ridurre la contaminazione, utilizzare un manicotto nuovo per siringa aria-acqua Sani-Shield monouso, oltre ad un nuovo puntale monouso Sani-Tip, per ogni paziente.

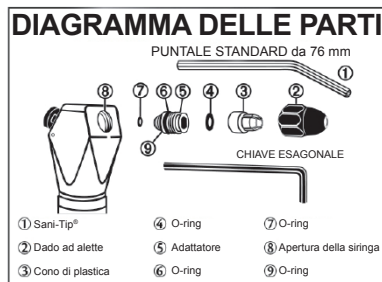**KIT DI CONVERSIONE O-3 PER SIRINGHE ARIA-ACQUA****ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE PER L'ADATTATORE DEL KIT DI CONVERSIONE**

1. Rimuovere il dado ad alette e il puntale della siringa attuali.



4. Verificare che l'O-ring (4) sia in posizione nell'apertura larga del cono di plastica bianco.

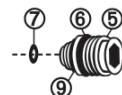

2. Verificare che il nuovo adattatore (5) abbia l'O-ring (6) e l'O-ring (9) intorno alla sezione centrale. Verificare che l'O-ring (7) sia alloggiato sull'estremità posteriore dell'adattatore.



5. Con l'O-ring in posizione, posizionare saldamente la parte larga del cono di plastica bianco sul labbro dell'adattatore.



3. Avvitare l'estremità dell'adattatore con l'O-ring piccolo sulla siringa. Usare la chiave esagonale fornita per stringere l'adattatore sulla siringa.



6. Stringere a mano il dado ad alette (2) sull'adattatore (5). Non stringere prima che il nuovo puntale sia stato inserito.

*L'installazione è terminata.*

**ISTRUZIONI PER L'UTENTE DEL KIT DI CONVERSIONE**

1. Quando il dado ad alette è allentato, inserire un nuovo puntale monouso Sani-Tip® e spingere nell'adattatore il più a fondo possibile. Mentre si spinge all'interno sul puntale, ruotare il puntale di 1/2 giro in senso orario per creare una tenuta stagna sull'asse interno affusolato per l'acqua. Stringere il dado ad alette.



2. Stringere a mano il dado ad alette. Per riorientare il puntale, spingere sul puntale mentre lo si ruota in senso orario.

**PROVE DA EFFETTUARE PRIMA DI OGNI USO:**  
Fare fuoriuscire acqua, quindi fare fuoriuscire soltanto aria. Se l'aria contiene umidità, o il puntale si sposta, fare riferimento alla sezione Individuazione e risoluzione dei problemi.

3. Per sostituire il puntale, allentare il dado ad alette. Rimuovere e scartare il puntale usato.

## PROCEDURE PER IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI

### AVVERTENZE

- I kit di conversione non sono sterili alla consegna e devono essere sterilizzati prima dell'uso in conformità con le seguenti istruzioni.

### LIMITAZIONI SULLE PROCEDURE

- Non usare disinfettanti chimici prima della sterilizzazione altrimenti potrebbe verificarsi un rapido deterioramento del materiale.
- I metodi di disinfezione/sterilizzazione con liquido a freddo, sterilizzazione chimica a vapore e di sterilizzazione a calore secco non sono stati testati o convalidati per l'efficacia e pertanto non sono raccomandati. Il loro uso può far decadere la garanzia.

### ISTRUZIONI

#### Punto d'uso:

Rimuovere la sporcizia eccedente con un panno monouso o carta.

#### Contenimento e trasporto:

Assicurarsi che i componenti del kit di conversione non si danneggino. La manutenzione dei componenti deve essere eseguita al più presto possibile dopo l'uso. I componenti lasciati bagnati possono macchiarsi o corrodarsi.

#### Preparazione per la decontaminazione:

Rimuovere i residui in eccesso dai componenti con un panno monouso o carta. Gettare il panno/la carta dopo l'uso. Smontare il kit di conversione dalla siringa acqua-aria. Rimuovere il cono di plastica e l'O-ring dell'adattatore.

#### Pulizia: automatica

Nessuna.

#### Pulizia: manuale

1. Pulire tutte le superfici esterne del kit di conversione Sani-Tip®, compresa la siringa acqua-aria con una soluzione di acqua e detergente delicato. Asciugare con un panno privo di lanugine.
2. Smontare il kit di conversione dalla siringa acqua-aria.
3. Pulire tutte le superfici interne dell'adattatore, del dado ad alette, del cono di plastica e dell'O-ring con una soluzione di acqua e detergente delicato. Asciugare con un panno privo di lanugine.
4. Continuare con la procedura di sterilizzazione elencata per l'adattatore e il dado ad alette.
5. Il cono di plastica e l'O-ring non sono sterilizzabili con autoclave a vapore. Continuare con le procedure di disinfezione elencate.

#### Disinfezione:

Disinfettare il cono di plastica e l'O-ring usando le soluzioni standard per disinfezione.

#### Imballaggio:

Disporre il dado ad alette e l'adattatore in un sacchetto di carta o di carta/plastica per la sterilizzazione a vapore. I componenti possono essere collocati nei vassoi portastrumenti dell'autoclave.

## PROCEDURE PER IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI

### ISTRUZIONI, continua

#### Sterilizzazione:

Usare un'autoclave a vapore. Disporre l'adattatore e il dado ad alette insaccati nell'autoclave a vapore, con il lato di carta rivolto verso l'alto quando si usa un sacchetto di carta/plastica. Al completamento del preriscaldamento, utilizzare una temperatura di sterilizzazione compresa tra 134 °C/273 °F e 137 °C/279 °F ed una pressione di 31 psi/216 kPa per 3-12 minuti.

*Altro metodo: Disporre l'adattatore e il dado ad alette non insaccati nell'autoclave a vapore. Al completamento del preriscaldamento, utilizzare una temperatura di sterilizzazione compresa tra 134 °C/273 °F e 137 °C/279 °F ed una pressione di 31 psi/216 kPa per 3-4 minuti. I componenti vanno usati immediatamente.*

#### Asciugare:

Per asciugare, usare il ciclo di asciugatura dell'autoclave. Regolare il ciclo per 20-30 minuti.

#### Manutenzione, controllo e prove:

- Controllare visivamente per accertarsi che ogni contaminazione sia stata rimossa.
- Controllare per vedere se ci sono distorsioni, danni o usura. Scartare i componenti danneggiati, usurati o corrosi.

#### Conservazione:

Per mantenere la sterilità, gli strumenti devono rimanere insaccati fino all'uso.

### CONTATTO FABBRICANTE:

Negli Stati Uniti, contattare l'assistenza tecnica di DENTSPLY Professional al numero 800-989-8826. Al di fuori dagli Stati Uniti, rivolgersi al rappresentante locale DENTSPLY Professional.



## INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

**PROBLEMA:** Perdite di acqua, aria umida, puntali e/o adattatori allentati. Indicano che:

- Il foro centrale del puntale Sani-Tip non è completamente alloggiato sull'asse per l'acqua all'interno del nuovo adattatore, oppure che
- Il kit di conversione Sani-Tip corretto non è installato correttamente, e/o presenta parti mancanti; il dado ad alette non è stato stretto completamente; oppure si stanno utilizzando puntali sbagliati, oppure
- L'adattatore non è completamente montato sulla siringa.
- L'asse interno per l'acqua è danneggiato.

**SOLUZIONE:**

- Tenere il corpo dell'adattatore per impedirne la rotazione e allentare il dado ad alette quando si scambiano i puntali monouso Sani-Tip. Inserire un nuovo puntale e spingere nell'adattatore il più a fondo possibile. Mentre si spinge all'interno, ruotare il puntale di 1/2 giro in senso orario per creare una tenuta stagna sull'asse interno affusolato per l'acqua. Stringere il dado ad alette.
- Assicurarsi che il kit di conversione corretto Sani-Tip sia correttamente installato. Confermare la presenza del cono di plastica e dell'O-ring. Tenere il corpo dell'adattatore per impedirne la rotazione e serrare completamente il dado ad alette dopo aver inserito il nuovo puntale. Verificare che i puntali siano puntali di plastica trasparente Sani-Tip prodotti da DENTSPLY Professional per il sistema Sani-Tip®.
- Spingere saldamente l'adattatore per quanto possibile sulla siringa. Il bordo dell'adattatore deve essere a filo con la faccia della siringa affinché il collegamento sia corretto.
- Se l'asse per l'acqua all'interno dell'adattatore Sani-Tip è danneggiato, sostituire l'adattatore.

**PROBLEMA:** Il puntale non passa attraverso il dado ad alette

**SOLUZIONE:** Allentare il dado ad alette di un giro completo per espandere l'apertura del cono di plastica.

**PROBLEMA:** Acqua insufficiente o assente.

**SOLUZIONE:** Controllare che l'asse per l'acqua non sia bloccato o danneggiato all'interno dell'adattatore, o che l'uscita per l'acqua non sia ostruita nella testa della siringa.

**PROBLEMA:** Pressione dell'acqua o dell'aria insufficiente o assente.

**SOLUZIONE:** Piccole regolazioni possono essere apportate sul riunito odontoiatrico. **Seguire le specifiche del fabbricante.**

### ESAMINARE SEMPRE PRIMA DELL'USO

*Fare fuoriuscire acqua, quindi fare fuoriuscire soltanto aria. Se l'aria contiene umidità, o il puntale si sposta, fare riferimento prima all'individuazione e risoluzione dei problemi.*

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Применяется для подачи воздуха или воды к операционному полю во время хирургических вмешательств.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Данный комплект не предназначен для использования с другими пистолетами подачи воздуха/воды.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Комплекты для переоборудования Sani-Tip® предназначены для использования исключительно с одноразовыми насадками для шприцев Sani-Tip®. Чтобы минимизировать риск нанесения вреда пациенту и повреждения и/или выхода из строя оборудования, используйте только переходники и наконечники из прозрачного пластика для пистолетов производства DENTSPLY Professional для систем Sani-Tip®. Соблюдайте прилагаемые инструкции.
- Одноразовые насадки для шприцев Sani-Tip® предназначены только для однократного применения. Удаляйте их в отходы после использования.
- Ассоциация профессиональных стоматологов (Dental Healthcare Professionals, DHCP) несет ответственность за определение надлежащего использования данного товара, заботу о здоровье каждого пациента, проводимые стоматологические процедуры, соблюдение отраслевых и государственных рекомендаций и требований, а также правил техники безопасности в стоматологии.
- Чтобы обеспечить надлежащую защиту от перекрестного загрязнения от другого оборудования, подсоединенного к стоматологической установке, настоятельно рекомендуется использовать стоматологическую установку с системой антриретракции. Кроме того, стоматологическая установка и антриретрационная система требуют надлежащего технического обслуживания и периодического тестирования. Чтобы получить более подробную информацию, свяжитесь с компанией-изготовителем вашей стоматологической установки.
- В случае если в соответствии с профессиональной оценкой DHCP требуется или считается целесообразным соблюдение правил асептики, данное изделие использовать не рекомендуется.


## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Несмотря на то что данный комплект может использоваться со всеми одноразовыми насадками Sani-Tip, рекомендуется его использование со стандартными (76 мм) одноразовыми насадками для шприцев Sani-Tip.
- Для снижения риска перекрестного заражения используйте для каждого пациента новый одноразовый чехол Sani-Shield для пистолета подачи воздуха/воды в дополнение к новому одноразовому наконечнику Sani-Tip.

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ 0-3 ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ИЛИ ВОДНЫХ ШПРИЦЕВ




## ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕХОДНИКА КОМПЛЕКТА ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ

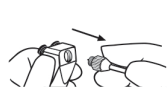

1. Ослабьте гайку с накаткой и снимите наконечник с пистолета.



4. Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо (4) находится на своем месте в большом отверстии белого пластмассового конуса.

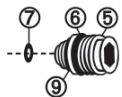

2. Убедитесь в том, что на новом переходнике (5) установлено уплотнительное кольцо (6) и уплотнительное кольцо (9) на средней части. Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо (7) вставлено в задний конец переходника.



5. Если уплотнительное кольцо установлено, с усилием наденьте широкий конец белого пластмассового конуса на губку переходника.




3. Ввинтите конец переходника с малым уплотнительным кольцом в шприц. Усилий руки затяните соединение прилагаемым шестигранным ключом.



6. Усилий руки навинтите накатную гайку (2) на переходник (5). Не затягивайте до установки нового наконечника.

*Установка завершена.*

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ

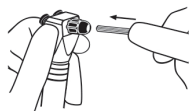

1. Ослабьте затяжку накатной гайки, вставьте новую одноразовую насадку Sani-Tip® и как можно глубже введите ее в переходник. Продолжая нажим внутрь, поверните насадку на 1/2 оборота по часовой стрелке, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение вокруг внутреннего конического штуцера подачи воды. Затяните накатную гайку. Затяните гайку с накаткой.



2. Усилий руки затяните накатную гайку. (Чтобы изменить направление насадки, нажмите на нее и одновременно поверните по часовой стрелке.)

**ПРОВЕРКА ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.**  
Подайте воду, затем подайте только воздух. При высоком содержании влаги в воздухе или отсоединении наконечника см. раздел «Поиск и устранение неисправностей».

3. Для замены наконечника ослабьте гайку с накаткой. Снимите использованную насадку и удалите ее в отходы.

## ПРОЦЕДУРЫ ПО БОРЬБЕ С ИНФЕКЦИЯМИ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Комплекты для переоборудования нестерильны при получении и должны быть стерилизованы перед началом использования в соответствии со следующими инструкциями.

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ

- Не используйте перед стерилизацией химические дезинфицирующие средства, поскольку может произойти быстрое ухудшение свойств материала.
- Методы холодной жидкостной дезинфекции/стерилизации, химической паровой стерилизации и сухожаровой стерилизации не изучались, и их эффективность не подтверждена, поэтому их применение не рекомендовано. Применение таких методов может повлечь утрату гарантии.
- Не допускается стерилизация конической пластиковой головки и уплотнительного кольца в паровом автоклаве.

### ИНСТРУКЦИИ

#### Место применения:

Следует удалить чрезмерную грязь с помощью одноразовой салфетки или бумаги.

#### Защита и перемещение:

Защищайте детали комплекта для переоборудования от повреждения. После применения инструменты следует подвергать повторной обработке как можно быстрее, при первой обоснованной с практической точки зрения возможности. Детали, оставленные мокрыми, могут покрываться пятнами или подвергнуться воздействию коррозии.

#### Подготовка к обеззараживанию:

Удалите с деталей чрезмерную грязь с помощью одноразовой салфетки или бумаги. Выбросьте использованную салфетку/бумагу. Снимите комплект с пистолета подачи воздуха/воды. Снимите пластиковую коническую головку и уплотнительное кольцо переходника.

#### Очистка: автоматизированная

Не применяется.

#### Очистка: ручная

1. Очистите все наружные поверхности комплекта Sani-Tip®, в том числе пистолет подачи воздуха/воды, с помощью раствора мягкого моющего средства и воды. Протрите тканью, не оставляющей ворса.
2. Снимите комплект с пистолета подачи воздуха/воды.
3. Очистите все внутренние поверхности переходника, гайки с накаткой, пластиковой конической головки и уплотнительного кольца с помощью раствора мягкого моющего средства и воды. Протрите тканью, не оставляющей ворса.
4. Затем обработайте переходник и гайку с накаткой в соответствии с описанной процедурой стерилизации.
5. Не допускается стерилизация конической пластиковой головки и уплотнительного кольца в паровом автоклаве. Затем обработайте в соответствии с описанной процедурой дезинфекции.

#### Дезинфекция:

Продезинфицируйте пластиковую коническую головку и уплотнительное кольцо с помощью стандартного дезинфицирующего раствора.

#### Упаковка:

Поместите гайку с накаткой и переходник в бумажный или в бумажно-пластиковый пакет для стерилизации паром. Детали можно загрузить в специальные лотки для инструментов.

## ПРОЦЕДУРЫ ПО БОРЬБЕ С ИНФЕКЦИЯМИ

### ИНСТРУКЦИИ (продолжение)

#### Стерилизация:

Проводится в автоклаве. Поместите упакованные переходник и гайку с накаткой в автоклав. При использовании бумажно-пластиковых пакетов бумажная сторона должна находиться сверху. После нагревания установите в автоклаве необходимые для стерилизации температуру (от 273°F / 134°C до 279°F / 137°C) и давление (31 фунт на кв. дюйм / 216 кПа) на время от 3 до 12 минут.

*Альтернативный метод: Поместите неупакованные переходник и гайку с накаткой в автоклав. После нагревания установите в автоклаве необходимые для стерилизации температуру (от 273°F / 134°C до 279°F / 137°C) и давление (31 фунт на кв. дюйм / 216 кПа) на время от 3 до 4 минут. Детали следует использовать немедленно.*

#### Сушка:

Для сушки инструментов воспользуйтесь циклом сушки автоклава. Длительность цикла следует установить равной 20—30 минутам.

#### Техобслуживание, осмотр и проверка:

- Визуально оцените на предмет удаления всех следов загрязнения.
- Проверьте на предмет деформации, повреждения и износа. Поврежденные, изношенные или подвергнутые действию коррозии детали следует выбросить.

#### Хранение:

Для сохранения стерильности инструменты следует держать в упаковке вплоть до следующего использования.

### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

В США обращайтесь в службу технической поддержки клиентов компании DENTSPLY Professional по телефону 800-989-8826. За пределами США обращайтесь к местному представителю компании DENTSPLY.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

**ПРОБЛЕМА:** Наличие протечек воды, влаги в воздухе, незатянутых насадок и/или переходника. Это свидетельствует о следующем:

- а.) Центральное отверстие одноразовой насадки Sani-Tip неплотно установлено на штуцер подачи воды внутри нового переходника.
- б.) Правильный комплект для переоборудования Sani-Tip установлен неправильно, и (или) в нём не хватает каких-либо частей; накатная гайка затянута не полностью или используется неправильная насадка.
- с.) Переходник не до упора закреплён на пистолете.
- д.) Внутренний штуцер подачи воды поврежден.

#### РЕШЕНИЕ:

- а.) При замене одноразовой насадки Sani-Tip удерживайте корпус переходника во избежание его вращения и ослабьте накатную гайку. Вставьте новую насадку и как можно глубже введите ее в переходник. Продолжая нажим внутрь, поверните насадку на 1/2 оборота по часовой стрелке, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение вокруг внутреннего конического штуцера подачи воды. Затяните гайку с накаткой.
- б.) Убедитесь, что правильный комплект Sani-Tip установлен должным образом. Убедитесь в наличии пластмассового конуса и всех уплотнительных колец. После установки нового наконечника затяните гайку с накаткой до упора, удерживая переходник для предотвращения вращения. Следует использовать одноразовые наконечники из прозрачного пластика, изготовленные компанией DENTSPLY Professional для системы Sani-Tip®.
- с.) С усилием надвиньте переходник как можно дальше на шприц. Для обеспечения надлежащего соединения ободок переходника должен находиться на одном уровне с основанием пистолета.
- д.) Если штуцер подачи воды внутри переходника Sani-Tip поврежден, замените переходник.

**ПРОБЛЕМА:** Насадка не входит в накатную гайку.

**РЕШЕНИЕ:** Ослабьте гайку с накаткой на полный оборот, чтобы расширить отверстие пластиковой конической головки.

**ПРОБЛЕМА:** Мало или нет воды.

**РЕШЕНИЕ:** Проверьте шпindelь водяного охлаждения внутри переходника на предмет засорения или повреждения, а выпускное отверстие для воды в головке пистолета — на предмет закупорки.

**ПРОБЛЕМА:** Слишком высокое или низкое давление воздуха или воды.

**РЕШЕНИЕ:** Возможна небольшая корректировка напора воздуха и воды на стоматологической установке. *Следуйте указаниям, приведенным в спецификациях компании-изготовителя.*

#### ОБЯЗАТЕЛЬНО ТЕСТИРУЙТЕ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ:

*Подайте воду, затем подайте только воздух. При наличии в воздухе влаги или отсоединении наконечника см. проблему 1 и ее решение.*



The enclosed adapter is covered, in whole or in combination with other parts of the SANI-TIP® System, by one or more of the following patents: U.S. 5,306,146; U.S. 5,489,205; AU 714134; CA 2,155,313; EP 0686017.

You do not have a license, express or implied, under any of these patents to make or sell the adapter. You have an express license only under Patent Numbers U.S. 5,306,146; and U.S. 5,489,205; and no implied license under any other of these patents, to use the adapter in combination with the enclosed syringe tip(s) furnished by DENTSPLY Professional.

If you use the adapter with syringe tips not furnished by DENTSPLY Professional, you are in violation of this license granted to you and you may be liable for willful patent infringement. If you use the adapter with syringe tips not furnished by DENTSPLY Professional, you do so entirely at your own risk and DENTSPLY Professional denies any responsibility for such use, including product liability and any express or implied warranties.

El adaptador que se adjunta está cubierto, en su integridad o junto con otras piezas del sistema SANI-TIP®, por una o más de las siguientes patentes: U.S. 5,306,146; U.S. 5,489,205; AU 714134; CA 2,155,313 y EP 0686017.

Estas patentes no le conceden licencia expresa ni implícita para fabricar o vender el adaptador. Tan solo las patentes U.S. 5,306,146 y U.S. 5,489,205 le conceden licencia expresa, y ninguna otra le concede licencia implícita, para utilizar el adaptador junto con la(s) punta(s) que se adjunta(n), suministrada(s) por DENTSPLY Professional.

Si utiliza el adaptador con puntas que no sean las suministradas por DENTSPLY Professional, estará violando esta licencia que se le ha concedido y podrá ser acusado de vulneración premeditada de patentes. Si utiliza el adaptador con puntas que no sean las suministradas por DENTSPLY Professional, lo hará bajo su completa responsabilidad y DENTSPLY Professional quedará eximida de cualquier responsabilidad que pudiera tener por tal uso, incluida la responsabilidad por el producto y cualquier garantía expresa o implícita.

L'adaptateur ci-joint est protégé, dans sa totalité ou en combinaison avec d'autres pièces du système SANI-TIP®, par un ou plusieurs des brevets suivants : U.S. 5,306,146; U.S. 5,489,205; AU 714134; CA 2,155,313; EP 0686017.

Aucun de ces brevets ne vous autorise, ni explicitement ni implicitement, à fabriquer ou vendre l'adaptateur. Vous possédez une licence explicite uniquement selon les numéros de brevets U.S. 5,306,146; et U.S. 5,489,205; et aucune licence implicite selon aucun autre de ces brevets, pour utiliser l'adaptateur combiné aux embouts pour seringue ci-joints fournis par DENTSPLY Professional.

Vous serez en violation de la licence qui vous a été accordée et responsable de violation de brevet délibérée en cas d'utilisation de l'adaptateur avec des embouts pour seringue qui ne sont pas fournis par DENTSPLY Professional. L'utilisation de l'adaptateur avec des embouts pour seringue qui ne sont pas fournis par DENTSPLY Professional sera à vos propres risques et périls et DENTSPLY Professional décline toute responsabilité pour une telle utilisation, y compris la fiabilité du produit et les garanties explicites ou implicites.

Der beiliegende Adapter fällt allein oder in Kombination mit anderen Teilen des SANI-TIP® Systems unter eines oder mehrere der folgenden Patente: U.S. 5,306,146; U.S. 5,489,205; AU 714134; CA 2,155,313; EP 0686017.

Keines dieser Patente verleiht Ihnen explizit oder implizit die Lizenz, den Adapter herzustellen oder zu verkaufen. Sie haben nur unter den Patentnummern U.S. 5,306,146; U.S. 5,489,205; die ausdrückliche Lizenz und keine implizierte Lizenz unter den anderen Patentnummern, den Adapter in Verbindung mit der/den beiliegenden Spitze/n von DENTSPLY Professional zu verwenden.

Wenn Sie den Adapter mit Spitzen verwenden, die nicht von DENTSPLY Professional geliefert wurden, machen Sie sich einer Verletzung des Lizenzrechts schuldig und können unter Umständen wegen eines Verstoßes haftbar gemacht werden. Wenn Sie den Adapter mit Spitzen verwenden, die nicht von DENTSPLY Professional geliefert wurden, geschieht dies auf Ihr eigenes Risiko und DENTSPLY Professional lehnt jede Verantwortung für eine solche Nutzung ab, einschließlich Produkthaftung und jeglicher expliziter oder impliziter Garantie.

L'adattatore incluso è coperto, in toto o congiuntamente ad altre parti del sistema SANI-TIP®, da uno o più dei seguenti brevetti: U.S. 5,306,146; U.S. 5,489,205; AU 714134; CA 2,155,313; EP 0686017.


Non viene concessa alcuna autorizzazione, espressa o implicita, ai sensi di qualunque di questi brevetti per realizzare o vendere l'adattatore. In base ai brevetti U.S. 5,306,146; U.S. 5,489,205 viene concessa esclusivamente una licenza esplicita (mentre non viene concessa alcuna licenza implicita in base ad altri brevetti) per utilizzare l'adattatore congiuntamente ai puntali per siringa inclusi forniti da DENTSPLY Professional.

Se si utilizza l'adattatore con puntali per siringa non forniti da DENTSPLY Professional, sussisterà una violazione di questa licenza e l'utente potrà essere ritenuto responsabile di violazione intenzionale di brevetto. L'utilizzo dell'adattatore con puntali per siringa non forniti da DENTSPLY Professional, è interamente a rischio dell'utente e DENTSPLY Professional declina qualsiasi responsabilità per tale uso, comprese la responsabilità per il prodotto ed eventuali garanzie espresse o implicite.

Настоящий переходник защищен полностью или в сочетании с другими деталями системы SANI-TIP® одним или несколькими из следующих патентов: U.S. 5,306,146; U.S. 5,489,205; AU 714134; CA 2,155,313; EP 0686017.

Ни один из этих патентов не дает вам ни прямо выраженную, ни косвенную лицензию на изготовление или продажу таких переходников. Вы располагаете только прямо выраженной лицензией по патентам № U.S. 5,306,146; U.S. 5,489,205; и никакими косвенными лицензиями по остальным из данных патентов на использование переходника в сочетании с прилагаемыми наконечниками для пистолетов, изготовленными компанией DENTSPLY Professional.

При использовании переходника с наконечниками для пистолетов, изготовленными не компанией DENTSPLY Professional, вы нарушаете настоящую предоставленную вам лицензию и можете понести ответственность за умышленное нарушение патента. Если вы пользуетесь переходником с наконечниками для пистолетов, изготовленными не компанией DENTSPLY Professional, то делаете это на собственный риск, и компания DENTSPLY Professional отказывается нести ответственность, включая ответственность за качество продукции и какие бы то ни было прямо выраженные или косвенные гарантии, за такое использование.

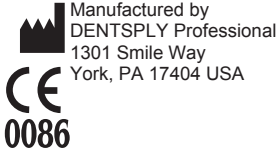

EC|REP DENTSPLY DeTrey GmbH  
De-Trey-Str. 1  
78467 Konstanz  
Germany

Imported and Distributed by  
DENTSPLY Canada  
Woodbridge, Ontario  
L4L 4A3

Form No. 120171 Rev. 4 (0817)

**Customer Service: 800-989-8826**